

# waterpik™

www.waterpik.co.kr

대표전화

**1688-2879** (이빨친구)  
**1599-2890**

판매원 : 제일(워터픽 한국공식총판 에이전트)  
주소 : 서울특별시 용산구 한강대로 211 용산대우월드마크 105호  
팩스 : 02-774-5136  
공급원 : Water Pik, Inc., Fort Collins, Colorado, U.S.A.

## 왜 워터픽일까요?

# waterpik™

구강세정기=워터픽?

많은 분들이 워터픽을 구강세정기의 고유명사로 호칭하고 있지만, 워터픽은 오랜 역사를 가진 구강세정기의 원조 브랜드명입니다.

### 워터픽은 오직, 워터픽 뿐입니다.



**구강세정기 시장 점유율 98%<sup>1)</sup>**

미국 전동 구강세정기 시장(전체) 점유율 1위



**전 세계 106개국 진출**

전 세계 약 106개의 국가<sup>2)</sup>에 진출하여 세계인이 사용



**60년 이상의 전통기업**

1962년부터 시작한 구강세정기 원조 브랜드로 오랜 전통을 가진 기업



**SCI급 전문 임상논문**

65편의 SCI급 전문 임상논문<sup>3)</sup>을 바탕으로 개발된 신개념 구강관리 제품



**미국 치과의사 추천 1위**

Actionable 조사 결과 미국 치과의사들이 가장 많이 추천하는 제품

(출처 : Actionable Research, Dental Professional AAU Study 2022)



**국내 소비자대상 갤럽코리아 설문조사 1위**

- 국내 구강세정기 **제품 추천 의향 1위**<sup>4)</sup>
- 국내 구강세정기 **이용 만족도 1위**<sup>4)</sup>
- 국내 구강세정기 **지속 이용 의향 1위**<sup>5)</sup>
- 국내 구강세정기 **최초 상기를 1위**<sup>6)</sup>

(구강세정기하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드)

<sup>1)</sup>2020.01.25 닐슨 리서치 기준 52주 판매기록 <sup>2)</sup>2022.06 공식홈페이지 기준 <sup>3)</sup>2021.07 기준 <sup>4)</sup>2021~2022년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 <sup>5)</sup>2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 <sup>6)</sup>2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4.05점 <sup>7)</sup>2021년 갤럽코리아 최초 상기를 19.6%

## 워터픽의 효과



### 잇몸 마사지 효과

워터픽의 강한 맥동 수압으로 잇몸을 마사지합니다. 잇몸은 우리 몸의 부위에서 혈액 순환 및 재생이 어려운 조직입니다. 워터픽은 잇몸의 **혈액 순환을 도와서 잇몸을 튼튼하게 관리**하는데 이상적입니다.

### 분당 1,200~1,450회의 물을 끊어 뿜어주는 맥동 수압

65편의 SCI급 전문 임상 논문을 바탕으로 한 워터픽의 고유 기술인 맥동 수압은 물줄기를 **잇몸에 가장 효과적**인 분당 1,200~1,450회로 힘 있게 끊어 쳐주어 잇몸에 무리를 주지 않고 잇몸 건강에 도움을 줍니다.

### 칫솔이 닿지 않는 곳까지 세정

칫솔질만으로는 치아와 잇몸 사이의 음식물 찌꺼기나 세균 등을 완전히 제거할 수 없습니다. 워터픽은 강력한 제트 수류를 이용하여 **칫솔이 닿지 않는 구석구석까지 완벽한 구강 세척**이 가능합니다. 이는 각종 치주 및 구강질환의 원인이 되는 잇몸 사이 등의 구강질환 세균들을 제거하는데 매우 효과적입니다.

## 이제 모든 사람들에게 워터픽은 선택이 아니라 필수입니다.

워터픽은 잇몸에 피가나는 분, 잇몸 관리가 필요하신 분, 입 냄새가 고민이신 분 등 모든 사람들에게 필요합니다. 특히 교정 치아와 임플란트 등 각종 구강관련 수술로 잇몸이 약해진 분들에게는 워터픽을 필수적으로 권해드립니다.



### 교정 치아

장기간 교정 치료 시 장치 사이에 충치 발생률이 매우 높아 일반 치아보다 더 세심한 관리가 필요합니다.



### 임플란트 치아

임플란트 및 각종 구강관련 수술을 하신 분에게는 **위생적이고 완벽한 구강관리**가 필수입니다.

무선

waterpik™

# 코드레스 프리덤 워터픽

Cordless Freedom Water Flosser  
WF-03K



## 제품 특징



### AA 배터리 교체형

충전을 기다리지 않아도 되는 AA배터리 교체형 제품으로 방전 시 빠르게 교체해서 사용

\* 제품에 배터리는 포함되어 있지 않습니다.

### 안정감 있는 그립감

손잡이의 돌기가 마찰력을 높여주어 미끄럼을 방지

## Cordless Freedom Water Flosser WF-03K



30초 물 용량



2단계 수압 조절



AA배터리 교체형



3개의 팁 구성



### 이동에 최적화

제공되는 트래블 플러그와 트래블 백으로 바깥에서 사용 후에도 물기 걱정 없이 위생적이고 편리한 보관

- 1) 트래블 플러그: 이동 시 누수 방지와 위생적인 효과
- 2) 트래블 백: 부드러운 마이크로파이버 소재로 편리한 보관과 이동



### 쉽고 빠른 팁 교체

손잡이 상단의 팁 분리 버튼을 누르고 팁을 위로 당겨 팁을 본체에서 교체 및 제거

## 실속 있는 팁 구성



### 기본 제트 팁 2

Jet Tip

일반적으로 사용하는 기본적인 세정 팁 (약 6개월마다 교체 권장)



### 치열교정 팁 1

Orthodontic Tip

치열교정 중 교정기 주위에 깨끗한 관리가 가능 (약 3개월마다 교체 권장)

## 배터리 교체 방법



1. 물통을 분리해 주세요.



2. 배터리 커버의 잠금 부분을 해제 표시에 놓고 뚜껑을 잡아당겨 분리해 줍니다.



3. AA배터리 3개를 표시에 따라 장착해 주세요.



4. 커버를 화살표 방향에 맞춰 장착 후 우측 눌러 커버를 잠금 부분으로 돌려주세요.

- 배터리 소진으로 기기가 작동하지 않을 때 배터리를 교체해 주세요.
- 본 제품에는 리튬 배터리를 사용하지 마세요. (알칼리성 또는 NiMH만 사용)

## 사용 시 주의사항


- 물 또는 다른 용액에 담그지 마세요.
- 혀나 입에 상처가 있을 경우 사용하지 마세요.
- 본 제품을 욕조, 샤워실이나 세면대 등 떨어질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마세요.




외부의 전기적 영향으로 인해 제품에 손상이 가해질 수 있습니다.

## 사용방법


사용방법 동영상 보기

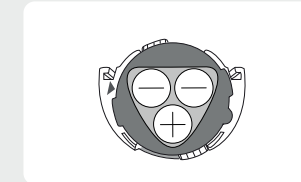

1 전원을 끈 상태에서 AA 배터리를 장착해 주세요.

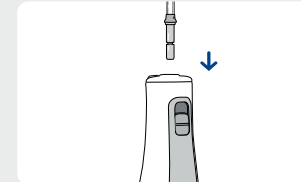

2 팁을 손잡이 위 홀에 삽입합니다. 팁이 빠지지 않는지 확인해 주세요.

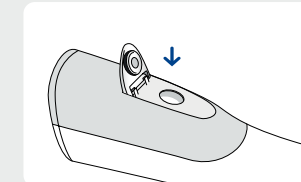


3 물통의 뚜껑을 열고 미온수를 채웁니다.




4 세면대로 상체를 낮게 구부리고 팁을 입에 넣은 후 입을 약간 벌려주세요.

물이 튀지 않고 입에서 흘러나올 정도로 입을 적당히 다물어 주세요.

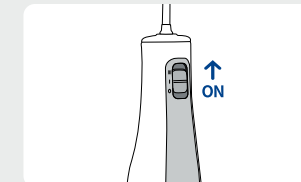


5 본체의 전원 스위치를 올려 전원을 켜주세요.

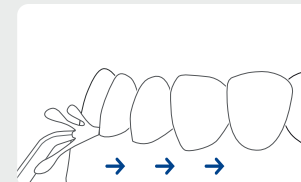

6 치아 쪽을 겨냥한 다음 원하는 세기로 수압을 맞춘 후 세정합니다.

물줄기가 잇몸 선 바로 위와 직각이 되게 하고 잇몸 선을 따라 옆으로 이동하면서 치아 사이마다 잠시 멈추세요. 이때, 치아와 분사되는 팁의 간격을 약 1cm 정도 떼주세요.

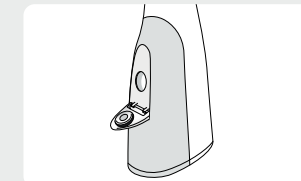

7 세정이 끝난 후에는 물통을 비우고 뚜껑을 열어 보관해 주세요.