

# waterpik®

www.waterpik.co.kr

대표전화

**1688-2879** (이빨친구)

**1599-2890**

판매원 : 제일(워터픽 한국공식총판 에이전트)

주소 : 서울특별시 용산구 한강대로 211 용산월드마크 207호  
(서울시 용산구 한강로1가 64번지 용산월드마크 207호)

팩스 : 02-774-5136

공급원 : Water Pik, Inc., Fort Collins, Colorado, U.S.A.

## 왜 워터픽일까요?

# waterpik®

구강세정기=워터픽?

많은 분들이 워터픽을 구강세정기의 고유명사로 호칭하고 있지만, 워터픽은 오랜 역사를 가진 구강세정기의 원조 브랜드명입니다.

### 워터픽은 오직, 워터픽 뿐입니다.



**구강세정기 시장 점유율 98%<sup>1)</sup>**

미국 전통 구강제품  
시장(전체) 점유율 1위



**전 세계 106개국 진출**

전 세계 약 106개의 국가<sup>2)</sup>에  
진출하여 세계인이 사용



**60년 이상의 전통기업**

1962년부터 시작한 구강세정기 원조  
브랜드로 오랜 전통을 가진 기업



**SCI급 전문 임상논문**

65편의 SCI급 전문 임상논문<sup>3)</sup>을 바탕으로  
개발된 신개념 구강관리 제품



**미국 치과의사 추천 1위**

Actionable 조사 결과 미국 치과의사들이  
가장 많이 추천하는 제품

(출처 : Actionable Research,  
Dental Professional AAU Study 2022)



**국내 소비자대상 갤럽코리아 설문조사 1위**

- 국내 구강세정기 제품 추천 의향 1위<sup>4)</sup>
- 국내 구강세정기 이용 만족도 1위<sup>4)</sup>
- 국내 구강세정기 지속 이용 의향 1위<sup>5)</sup>
- 국내 구강세정기 최초 상기를 1위<sup>6)</sup>  
(구강세정기하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드)

<sup>1)</sup>2020.01.25 닐슨 리서치 기준 52주 판매기록 <sup>2)</sup>2022.06 공식홈페이지 기준 <sup>3)</sup>2021.07 기준 <sup>4)</sup>2021~2022년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 <sup>5)</sup>2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 <sup>6)</sup>2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4.05점 <sup>7)</sup>2021년 갤럽코리아 최초 상기를 19.6%

## 워터픽의 효과



### 잇몸 마사지 효과

워터픽의 강한 맥동 수압으로 잇몸을 마사지합니다. 잇몸은 우리 몸의 부위에서 혈액 순환 및 재생이 어려운 조직입니다. 워터픽은 잇몸의 혈액 순환을 도와서 잇몸을 튼튼하게 관리하는데 이상적입니다.

### 분당 1,200~1,450회의 물을 끊어 뿜어주는 맥동 수압

65편의 SCI급 전문 임상 논문을 바탕으로 한 워터픽의 고유 기술인 맥동 수압은 물줄기를 잇몸에 가장 효과적인 분당 1,200~1,450회로 힘 있게 끊어 쳐주어 잇몸에 무리를 주지 않고 잇몸 건강에 도움을 줍니다.

### 칫솔이 닿지 않는 곳까지 세정

칫솔질만으로는 치아와 잇몸 사이의 음식물 찌꺼기나 세균 등을 완전히 제거할 수 없습니다. 워터픽은 강력한 제트 수류를 이용하여 **칫솔이 닿지 않는 구석구석까지 완벽한 구강 세척**이 가능합니다. 이는 각종 치주 및 구강질환의 원인이 되는 잇몸 사이 등의 구강질환 세균들을 제거하는데 매우 효과적입니다.

## 이제 모든 사람들에게 워터픽은 선택이 아니라 필수입니다.

워터픽은 잇몸에 피가나는 분, 잇몸 관리가 필요하신 분, 입 냄새가 고민하신 분 등 모든 사람들에게 필요합니다. 특히 교정 치아와 임플란트 등 각종 구강관련 수술로 잇몸이 약해진 분들에게는 워터픽을 필수적으로 권해드립니다.



### 교정 치아

장기간 교정 치료 시 장치 사이에 충치 발생률이 매우 높아  
일반 치아보다 더 세심한 관리가 필요합니다.



### 임플란트 치아

임플란트 및 각종 구강관련 수술을 하신 분에게는 위생적이고  
완벽한 구강관리가 필수입니다.

무선

waterpik®

# 코드레스 플러스 워터픽

Cordless Plus Water Flosser  
WP-450K



## 제품 특징



### 전용 충전기로 알맞게

코드레스 플러스 워터픽의 전용 충전기로 안전하고 알맞은 배터리 충전

### 안정감 있는 그립감

손잡이의 실리콘이 마찰력을 높여주어 미끄럼을 방지

## Cordless Plus Water Flosser WP-450K



45초 물 용량



2단계 수압 조절



전용 충전기



5개의 팁 구성



### 쉽고 빠른 팁 교체

손잡이 상단의 팁 분리 버튼을 누르고 팁을 위로 당겨 팁을 본체에서 교체 및 제거



### 360도 회전 팁

손잡이 상단의 방향 조절기가 입안을 360도 회전하여 구석구석 놓친 곳 없이 세정

## 효과적이고 다양한 팁 구성



### 기본 제트 팁 2

Jet Tip

일반적으로 사용하는 기본적인 세정 팁 (약 6개월마다 교체 권장)



### 플라그 팁 1

Plaque Seeker™ Tip

음식을 찌꺼기와 플라그 제거에 도움 (약 3개월마다 교체 권장)



### 치열교정 팁 1

Orthodontic Tip

치열교정 중 교정기 주위에 깨끗한 관리가 가능 (약 3개월마다 교체 권장)



### 혀클리너 팁 1

Tongue Cleaner Tip

혀에 낀 설태를 닦아주어 입 냄새를 줄여줌 (약 6개월마다 교체 권장)


## 사용 시 주의사항

- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
- 전선은 뜨거운 표면으로부터 멀리하세요.
- 물 또는 다른 용액에 담그지 마세요.
- 혀나 입에 상처가 있을 경우 사용하지 마세요.
- 본 제품을 욕조, 샤워실이나 세면대 등 떨어질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마세요.




제품을 사용하지 않을 때에는 플러그를 콘센트에서 빼주세요. 외부의 전기적 영향으로 인해 제품에 손상이 가해질 수 있습니다.


## 사용방법

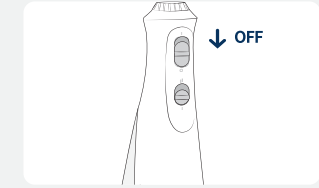


**1** 전원을 끈 상태에서 충전기를 연결하여 약 12시간(처음 사용 시 24시간) 이상 충전하세요. 완충 후 충전기를 분리해 주세요.

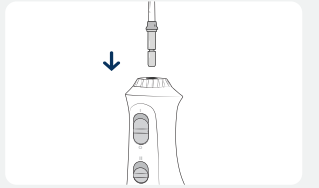

**2** 팁을 손잡이 위 홀에 삽입합니다. 팁이 빠지지 않는지 확인해 주세요.

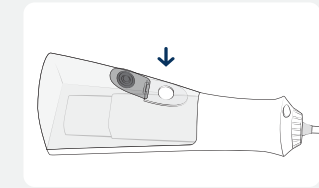

**3** 물통의 뚜껑을 열고 미온수를 채웁니다.

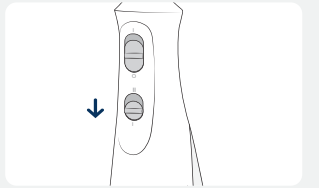


**4** 수압 조절 스위치를 낮은 단계로 맞춰주세요.




**5** 세면대로 상체를 낮게 구부리고 팁을 입에 넣은 후 입을 약간 벌려주세요. 물이 튀지 않고 입에서 흘러나올 정도로 입을 적당히 다물어 주세요.



**6** 본체의 전원 스위치를 위로(ON) 올려주세요.

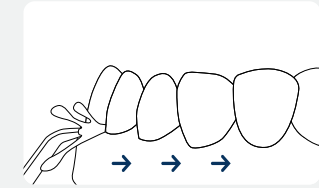

**7** 치아 쪽을 겨냥한 다음 원하는 세기로 수압을 맞춘 후 세정합니다. 물줄기가 잇몸 선 바로 위와 직각이 되게 하고 잇몸 선을 따라 옆으로 이동하면서 치아 사이마다 잠시 멈추세요. 이때, 치아와 분사되는 팁의 간격을 약 1cm 정도 떼주세요.

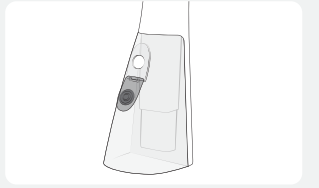

**8** 세정이 끝난 후에는 물통을 비우고 뚜껑을 열어 보관해 주세요.