



대표전화
1688-2879 (이빨친구)
1599-2890

판매원 : 제일(워터픽 한국공식총판 에이전트)
 주소 : 서울특별시 용산구 한강대로 211 용산월드마크 207호
 (서울시 용산구 한강로1가 64번지 용산월드마크 207호)
 팩스 : 02-774-5136
 공급원 : Water Pik, Inc., Fort Collins, Colorado, U.S.A.

왜 워터픽일까요?

waterpik®

구강세정기=워터픽?

많은 분들이 워터픽을 구강세정기의 고유명사로 호칭하고 있지만, 워터픽은 오랜 역사를 가진 구강세정기의 원조 브랜드명입니다.

워터픽은 오직, 워터픽 뿐입니다.

 <p>구강세정기 시장 점유율 98%¹⁾ 미국 전통 구강제품 시장(전체) 점유율 1위</p>	 <p>전 세계 106개국 진출 전 세계 약 106개의 국가²⁾에 진출하여 세계인이 사용</p>
 <p>60년 이상의 전통기업 1962년부터 시작한 구강세정기 원조 브랜드로 오랜 전통을 가진 기업</p>	 <p>SCI급 전문 임상논문 65편의 SCI급 전문 임상논문³⁾을 바탕으로 개발된 신개념 구강관리 제품</p>

미국 치과의사 추천 1위


Actionable 조사 결과 미국 치과의사들이 가장 많이 추천하는 제품
 (출처 : Actionable Research, Dental Professional AAU Study 2022)

국내 소비자 대상 갤럽코리아 설문조사 1위

- 국내 구강세정기 제품 추천 의향 1위⁴⁾
- 국내 구강세정기 이용 만족도 1위⁴⁾
- 국내 구강세정기 지속 이용 의향 1위⁵⁾
- 국내 구강세정기 최초 상기를 1위⁶⁾
 (구강세정기하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드)

¹⁾2020.01.25 닐슨 리서치 기준 52주 판매기록 ²⁾2022.06 공식홈페이지 기준 ³⁾2021.07 기준 ⁴⁾2021~2022년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 ⁵⁾2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4점 ⁶⁾2021년 갤럽코리아 5점만점 기준 평균 4.05점 ⁷⁾2021년 갤럽코리아 최초 상기를 19.6%

워터픽의 효과

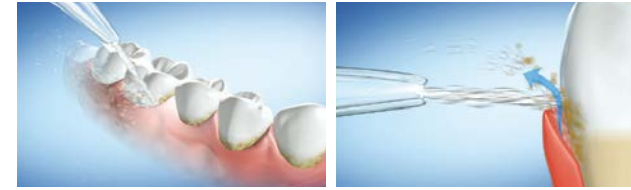

잇몸 마사지 효과

워터픽의 강한 맥동 수압으로 잇몸을 마사지합니다. 잇몸은 우리 몸의 부위에서 혈액 순환 및 재생이 어려운 조직입니다. 워터픽은 잇몸의 혈액 순환을 도와서 잇몸을 튼튼하게 관리하는데 이상적입니다.

분당 1,200~1,450회의 물을 끊어 뿜어주는 맥동 수압

65편의 SCI급 전문 임상 논문을 바탕으로 한 워터픽의 고유 기술인 맥동 수압은 물줄기를 잇몸에 가장 효과적^인 분당 1,200~1,450회로 힘 있게 끊어 쳐주어 잇몸에 무리를 주지 않고 잇몸 건강에 도움을 줍니다.

칫솔이 닿지 않는 곳까지 세정

칫솔질만으로는 치아와 잇몸 사이의 음식물 찌꺼기나 세균 등을 완전히 제거할 수 없습니다. 워터픽은 강력한 제트 수류를 이용하여 **칫솔이 닿지 않는 구석구석까지 완벽한 구강 세척**이 가능합니다. 이는 각종 치주 및 구강질환의 원인이 되는 잇몸 사이 등의 구강질환 세균들을 제거하는데 매우 효과적입니다.

이제 모든 사람들에게 워터픽은 선택이 아니라 필수입니다.

워터픽은 잇몸에 피가나는 분, 잇몸 관리가 필요하신 분, 입 냄새가 고민하신 분 등 모든 사람들에게 필요합니다. 특히 교정 치아와 임플란트 등 각종 구강관련 수술로 잇몸이 약해진 분들에게는 워터픽을 필수적으로 권해드립니다.

교정 치아

장기간 교정 치료 시 장치 사이에 충치 발생률이 매우 높아 일반 치아보다 더 세심한 관리가 필요합니다.

임플란트 치아

임플란트 및 각종 구강관련 수술을 하신 분에게는 위생적이고 완벽한 구강관리가 필수입니다.

유선

waterpik®

울트라 프로페셔널 워터픽

Ultra Professional Water Flosser
 WP-670K



제품 특징

Ultra Professional Water Flosser WP-670K

효과적이고 다양한 팁 구성

사용방법

사용방법
동영상 보기



팁 분리 스위치
일시정지 스위치
전원 버튼
모드 변경 버튼
10단계 수압 조절 다이얼



방향 조절 손잡이
물통 (600ml)
물 빠짐 홀
90초 물 용량
10단계 수압 조절
치실, 마사지 모드
8개의 팁 구성



독보적인 새틴 크롬

세련된 새틴 크롬 소재로 업그레이드 되어 더욱 새로워지고 스타일리쉬해진 구강세정기

두 가지 구강세정 모드

두 가지의 구강세정 모드로 잇몸 상태에 따라 매일매일 맞춤 세정

- 치실 모드 (Floss)
치아 사이나 교정기 주위에 낀 음식물과 플라그를 제거
- 마사지 모드 (Massage)
하이드로 펄스 마사지 모드로 잇몸 자극을 통한 잇몸 강화

360도 회전 팁

손잡이 상단의 방향 조절기가 입안을 360도 회전하여 구석구석 놓친 곳 없이 세정

본체 내부 팁 보관함

자주 사용하는 팁을 위생적이고 간편하게 보관할 수 있는 본체 내부의 팁 보관함

* 4개의 팁을 보관하고 휴대할 수 있는 팁 케이스 제공

기본 제트 팁 4 Jet Tip

일반적으로 사용하는 기본적인 세정 팁
(약 6개월마다 교체 권장)

플라그 팁 1 Plaque Seeker™ Tip

음식을 찌꺼기와 플라그 제거에 도움
(약 3개월마다 교체 권장)

치열교정 팁 1 Orthodontic Tip

치열교정 중 교정기 주위에 깨끗한 관리가 가능
(약 3개월마다 교체 권장)

픽 포켓 팁 1 Pik Pocket™ Tip

물이나 항생 용액을 잇몸 속에 주입하는 팁
* 반드시 1단계 수압에서 사용
(약 3개월마다 교체 권장)

혀클리너 팁 1 Tongue Cleaner Tip


혀에 낀 설태를 닦아주어 입 냄새를 줄여줌
(약 6개월마다 교체 권장)

사용 시 주의사항


- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
- 전선은 뜨거운 표면으로부터 멀리하세요.
- 물 또는 다른 용액에 담그지 마세요.
- 혀나 입에 상처가 있을 경우 사용하지 마세요.
- 본 제품을 욕조, 샤워실이나 세면대 등 떨어질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마세요.




제품을 사용하지 않을 때에는 플러그를 콘센트에서 빼주세요.
외부의 전기적 영향으로 인해 제품에 손상이 가해질 수 있습니다.

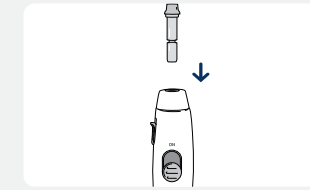


1 팁을 손잡이 위 홈에 삽입합니다. 팁이 빠지지 않는지 확인해 주세요.

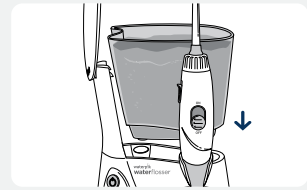


2 물통에 미온수를 채운 다음 본체와 잘 결합되도록 뚜껑 돌려 장착해 주세요.

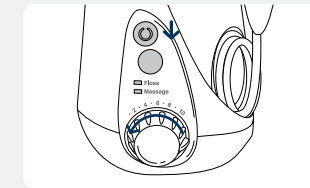


3 수압을 가장 낮은 단계로 맞추고 사용 중 자신에게 맞는 수압으로 조절해 주세요.

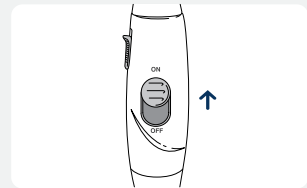


4 손잡이의 일시정지 스위치를 ON으로 밀어 올려주세요.

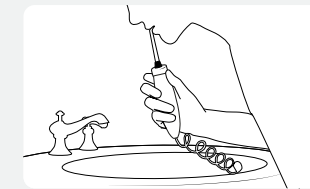


5 세면대로 상체를 낮게 구부리고 팁을 입에 넣은 후 입을 약간 벌려주세요. 물이 튀지 않고 입에서 흘러나올 정도로 입을 적당히 다물어 주세요.

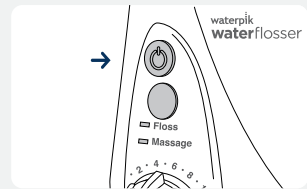

6 본체의 전원 버튼을 눌러주세요.

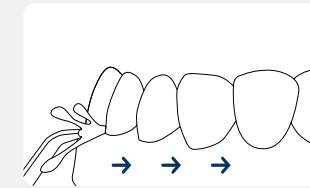

7 치아 쪽을 겨냥한 다음 원하는 세기로 수압을 맞춘 후 세정합니다. 물줄기가 잇몸 선 바로 위와 직각이 되게 하고 잇몸 선을 따라 옆으로 이동하면서 치아 사이마다 잠시 멈추세요. 이때, 치아와 분사되는 팁의 간격을 약 1cm 정도 떼주세요.

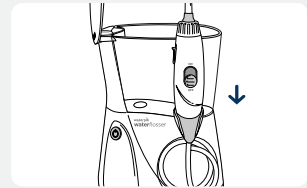

8 세정이 끝난 후에는 물통을 비우고 손잡이를 제자리에 잘 꽂아 보관하세요.